




Pureskin

CELKOVÝ FACELIFT & IONTOVÁ GALVANICKÁ PÉČE O PLEŤ



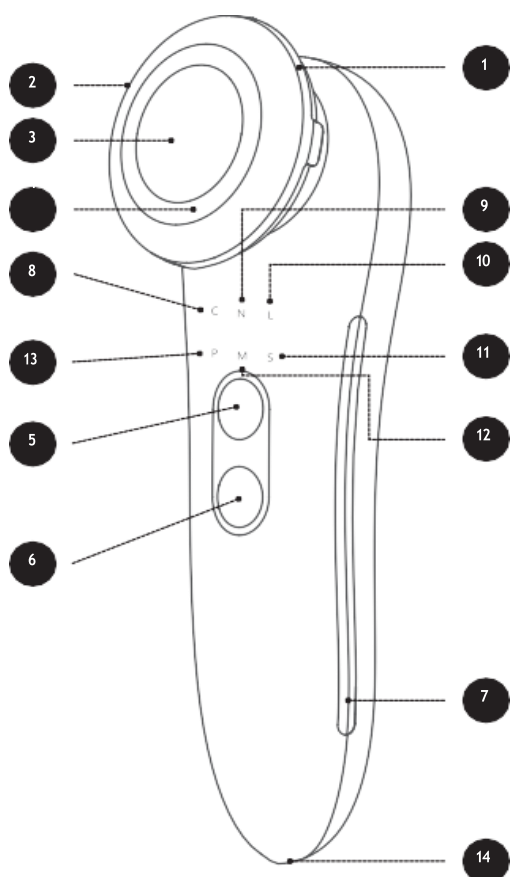

ČESKY

PŘEDSTAVENÍ

Děkujeme, že jste si vybrali LANAFORM Pureskin. Se svými 6 funkcemi vám Pureskin umožňuje pečovat o vaši pokožku, zejména pro:

- Čištění obličeje;
- Usnadnění průniku kosmetických roztoků;
- Omlazení a zpevnění pokožky obličeje;
- Zvýraznění kontur obličeje (ve tvaru V);
- Kontrola tvorby kožního mazu

Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny, zejména tyto základní bezpečnostní pokyny.

☒ Fotografie a další obrázky produktu v tomto návodu a na obalu jsou co nejpřesnější, ale nejedná se o dokonalou reprodukci produktu.

OBSAH

- 1 Rozbalení
- 2 Obsah balení

3 Symboly

4 Bezpečnostní opatření

5 Popis produktu

6 Instrukce k použití

7 Čištění a údržba

8 Technické specifikace

9 Záruka

10 Likvidace odpadu

1. ROZBALENÍ




Před použitím prosím pečlivě otevřete obal. Zkontrolujte, zda je k dispozici veškeré příslušenství a zda nebyly některé součásti poškozeny během přepravy a dodržujte pokyny k instalaci a obsluze uvedené v tomto návodu. V případě jakéhokoli poškození nebo nesprávné funkce kontaktujte přímo prodejce nebo společnost Lanaform. V případě jakékoli reklamace budete potřebovat model zařízení, sériové číslo, datum nákupu, vaše údaje a vaši adresu.

2. OBSAH BALENÍ

- 1 přístroj na ošetření Pureskin
- 1 USB nabíjecí kabel
- 1 kosmetický bavlněný fixační kroužek
- 1 návod k použití
- 1 úložný sáček

3. SYMBOLY

V návodu k použití se mohou objevit následující značky a symboly.

Symbol	Popis
	Tento symbol vás upozorňuje na rizika zranění nebo ohrožení vašeho zdraví
	Nebezpečí požáru
	Poznámka
	Prostudujte si návod k použití
	Symbol CE: tento výrobek splňuje požadavky aktuálních národních a evropských směrnic
	Elektroodpad je nutné odevzdat do specializovaného sběrného místa k recyklaci.

4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pečlivě si přečtěte následující upozornění před použitím Pureskin.

- ▲ **Vezměte prosím na vědomí**
 - Pureskin používejte pouze k ošetření lidské tváře. Zařízení je určeno výhradně pro použití, které je popsáno v tomto návodu pro použití. Používejte zařízení pouze podle instrukcí. Výrobce nemůže nést odpovědnost za způsobenou škodu nevhodným nebo nesprávným použitím.
 - Toto zařízení je určeno pouze pro osobní použití, ne pro komerční využití.
 - Není zamýšleno používat tento přístroj lidmi, včetně dětí se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo lidmi s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučení o způsobu použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
 - Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály se zařízením.

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Následující osoby mají zakázáno výrobek používat: pacienti se zhoubnými nádory, lidé s implantovanými zdravotnickými zařízeními, jako je např. kardiostimulátor, **nemohou funkci importu používat těhotné ženy, ženy, které menstrují, mají obavy, trpí srdečním onemocněním a jsou příliš unavené.**

- Věnujte prosím zvláštní pozornost funkci ultrazvuk. Nesmí se používat pro oči, hrtan, uši atd.

- Před použitím se prosím ujistěte, že výrobek není poškozený, a že indikátor spuštění a teplota výrobku jsou normální.

- Než začnete přípravek Pureskin používat, pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny.

Nedodržení níže uvedených pokynů pravděpodobně může způsobit zranění osob nebo poškození majetku. Uchovejte tento návod k použití a mějte jej k dispozici pro všechny ostatní uživatele. Pokud předáte přístroj komukoli dalšímu, předejte jim také tento návod k použití.

- Pokud během používání zařízení zaznamenáte zhoršení stavu pokožky, výskyt nežádoucích vedlejších účinků nebo přetrvávající zarudnutí, přestaňte zařízení používat a poraďte se se svým lékařem.

- **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj na kůži s chronickými nebo akutními onemocněními (poranění nebo záněty) (např. v případě bolestivých nebo nebolestivých zánětů, zarudnutí, vyrážky (alergie apod.), popálenin, pohmožděnin, otoků, otevřených nebo hojících ran).
- Udržujte zařízení mimo dosah vody.

- ▲ **Úraz elektrickým proudem**

- Jako každé elektrické zařízení je třeba PureSkin používat opatrně a pozorně, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

- Při nabíjení tohoto produktu používejte nabíječku s výstupem DC 5V A1, v souladu s národními normami platnými pro tento produkt. Abyste zabránili poruše, požáru nebo požáru z přehřátí výrobku, zapojte nabíječku správně do elektrické zásuvky.

- Nepřipojujte adaptér ke zdroji napájení, když je zařízení vypnuté.

- Pokud zařízení nebo jeho příslušenství vykazuje známky poškození, nepoužívejte

jej.

- Zařízení nepoužívejte, pokud spadlo nebo pokud dovnitř pronikla voda.
- Nepoužívejte zařízení během bouřky.
- Pokud je zařízení vadné nebo se porouchá, okamžitě jej vypněte. Odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Při vytahování adaptéru ze zásuvky netahejte za napájecí kabel ani za zařízení.
- Nedržte a nikdy nepřenášejte zařízení za napájecí kabel.
- Nepřiskřípněte kabel.
- Vzhledem k tomu, že tento výrobek má integrovanou dobíjecí baterii, nevhazujte výrobek do ohně a nepoužívejte jej v prostředí s vysokou teplotou a v přehřátých prostorech, protože by mohlo dojít k poruše, požáru nebo požáru způsobenému teplem.
- Baterie tohoto produktu je vyhrazená baterie. Pokud ji budete používat i po překročení její životnosti, může uvnitř baterie dojít k chemické reakci, která způsobí roztažení a deformaci. Výrobek se může deformovat při vysokých teplotách nebo při silných nárazech. Pokud je výrobek zdeformovaný, nepoužívejte jej, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem a požáru.
- Udržujte napájecí adaptér mimo horké povrchy.
- Ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka síťového adaptéru nepřijdou do kontaktu s vodou, párou nebo jinými tekutinami.
- Nepokoušejte se vytáhnout zařízení, které spadlo do vody.
- Okamžitě jej odpojte ze sítě.

▲ **Opravy**

- Zařízení by se nemělo otevírat.
- Opravovat elektrická zařízení smí pouze odborník. Jakákoli nesprávná oprava může pro uživatele způsobit značné riziko. Pro případné opravy kontaktujte zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce. Neprovádějte údržbu zařízení, pokud nejste kvalifikovaný odborník. V případě potřeby mohou vnitřní údržbu provádět pouze kvalifikovaní odborníci na údržbu.

▲ **Nebezpečí požáru**

- Jakékoli nevhodné použití nebo použití, které není v souladu s tímto návodem k

obsluze, může způsobit nebezpečí požáru!

- Nepoužívejte zařízení v zakrytém prostoru, například pod krytem nebo pod polštáři.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti vysoce hořlavých materiálů.
- Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryté.
- Nikdy neodpojujte zařízení, když je zapnuté. Vždy jej předem vypněte.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

ⓘ **Poznámka**

- Výrobek je nutné po použití vyčistit, aby se zabránilo usazování mastnoty a jiných zbytků.

5. POPIS PRODUKTU, obr. 1

- 1 kosmetický bavlněný fixační kroužek
- 2 elektroda
- 3 ultrazvuková hlavice
- 4 červené a modré LED světlo
- 5 Tlačítko zapnutí/vypnutí a intenzity
- 6 Tlačítko výběru režimu
- 7 Elektroda
- 8 Režim "Čištění"
- 9 Režim "Výživy pleti"
- 10 Režim "Lifting"
- 11 Režim "Zklidnění"
- 12 Režim "Masáž"
- 13 Režim "Photon"
- 14 Nabíjecí port

6. INSTRUKCE K POUŽITÍ

Nabíjení

- 1 Před prvním použitím produkt nabijte. Ujistěte se, že používáte nabíječku podle níže uvedených požadavků. Pokud jej používáte v zahraničí, nejprve zkontrolujte, zda jsou napětí a nabíječka v dané zemi vhodné pro tento produkt.
- 2 Při nabíjení zařízení nejprve vypněte. Připojte nabíječku k USB kabelu, který je součástí balení. Vložte nabíječku do síťového zdroje a připojte zařízení k USB nabíjecímu kabelu.
- 3 Indikátory různých programů začnou blikat („C“ a „P“ a poté „N“ a „M“ a nakonec „L“ a „S“), což znamená, že probíhá nabíjení. Jakmile proces nabíjení skončí, všechny kontrolky se rozsvítí a budou trvale svítit. V tomto okamžiku odpojte produkt od USB kabelu

a odpojte nabíječku od napájení. Je zcela normální, že se zařízení a nabíječka mírně zahřívají.

4 Plné nabití produktu pomocí nabíječky, která splňuje požadavky, trvá přibližně dvě hodiny. Doba se může lišit v závislosti na konkrétních okolnostech.

▲ **Varování**

- Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokřima rukama (může to způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat produktu).
- Nepoužívejte jej v blízkosti vody, např. ve vaně nebo vlhkém prostředí, aby nedošlo k poruše či zkratu.
- Použijte nabíječku, která splňuje požadavky na nabíjení.
- Během nabíjení byste neměli být příliš blízko zařízení; když odcházíte na delší dobu, přestaňte zařízení nabíjet.
- Pokud se během nabíjení objeví jakékoli anomálie, okamžitě jej odpojte. Pokud je nabíjecí kabel poškozen nebo pokud je zástrčka uvolněná, okamžitě ukončete nabíjení.

Používejte a udržujte nabíjecí kabel správně. Neohýbejte jej, nenatahujte, nekruťte, nestlačujte ani neomotávejte kolem nabíječky.

Jak používat zařízení

Pureskin vám nabízí 6 doplňkových režimů pro ošetření, čištění a péči o obličej a proti stárnutí: režim „čištění“, „výživy pleti“, „lifting“ „zklidnění“, „masážní“ a „photonový“ režim.

Všech těchto 6 režimů ošetření obličeje využívá různé kombinace technologií, tj.: technologii sonických vibrací (frekvence vibrací < 20 000 Hz), masážní technologii pomocí horkého obkladu (>42°C), iontovou + emisní technologii; technologii ultrazvukových vibrací (frekvence vibrací > 20 000 Hz); technologii elektroporace; mikroproudové masážní technologie (EMS); vyzařování červeného (vlnová délka 623nm) a modrého (vlnová délka 465nm) LED světla.

Nejprve podržte tlačítko On/Off pro zapnutí Pureskin. Jednotlivé režimy léčby budou postupně blikat. Pro výběr jednoho ze 6 režimů dle vašeho výběru stačí

stisknout tlačítko „výběru režimu“, dokud se nerozsvítí příslušná LED kontrolka. Každý režim má 3 úrovně intenzity. Chcete-li vybrat jednu z nich, stiskněte tlačítko „Zap/Vyp“. Pokud zvolíte intenzitu 1, rozsvítí se písmena „C“ a „P“, pro intenzitu 2 se rozsvítí písmena „C“, „P“, „N“ a „M“ a pro intenzitu 3 se rozsvítí všechna písmena.

Chcete-li zahájit zvolené ošetření, držte Pureskin v ruce tak, aby byl v kontaktu se dvěma elektrodami umístěnými na každé straně jednotky a masážní hlavice byla v kontaktu s vaším obličejem.

Režim „Čištění“ (C)

Tento režim poskytuje hloubkové čištění pleti pomocí kombinace 3 technik:

- Techniky sonických vibrací a použití horkého obkladu: Tyto techniky mohou upravit propustnost buněčné membrány, a tím otevřít póry na pokožce obličeje.
- Technika iont + emise: Tato technika vyzařuje kladné ionty pro absorbování nečistot obsažených v pokožce obličeje a poskytuje tak hloubkové čištění pleti. Ujistěte se, že v tomto režimu používáte kosmetický vatový tampon a dbejte na to, abyste jej správně připevnili pomocí plastového kroužku.

Režim „Výživy pleti“ (N)

Tento režim zajišťuje lepší pronikání kosmetických produktů, jako jsou pleťová mléka, séra, krémy atd.

1 Techniky zvukových vibrací a použití horkého obkladu otevrou kožní póry, což znamená lepší absorpci kosmetických výrobků.

2 Technika ultrazvukových vibrací (frekvence vibrací > 20 000 Hz) sama o sobě stimuluje regeneraci kožních buněk.

3 Technika elektroporace spočívá v aplikaci elektrického pole na buněčné membrány v daném pořadí, aby se zvýšila jejich propustnost.

Režim "Lifting" (L)

Tento režim zpevňuje pokožku a redefinuje kontury obličeje (ve tvaru V). Tento režim se doporučuje zejména jako večerní ošetření.

- Technika sonických vibrací a použití teplé komprese masírují pokožku. Mikroprúdová masáž (EMS) spojená s ultrazvukovými vibracemi stimuluje tkáň, aby se zvýšilo zpevnění pokožky.

Režim „Photon“ (P)

Tento režim omlazuje pokožku a kontroluje produkci kožního mazu.

- Ve spojení s technikou sonických vibrací, která aktivuje stimulaci buněk, bude mít střídavé vyzařování červeného a modrého LED světla s definovanou vlnovou délkou mnohonásobný účinek: modré LED světlo má uklidňující účinek v boji proti akné a může regulovat sekreci kožního mazu, zatímco červené světlo podporuje proliferaci kolagenu a zjemňuje jemné linky. Plet' je lesklejší a pružnější.

Režim "Masáž" (M)

Tento režim poskytuje relaxační a omlazující masáž pokožky obličeje.

- Spojení zvukových vibrací, použití teplé komprese a červeného LED světla pomáhá učinit pokožku pružnější a mladší.

"Zklidňující" režim (S)

Tento režim uvolňuje pokožku a reguluje tvorbu kožního mazu.

- Spojení sonických vibrací, použití horkého obkladu a modrého LED světla pomáhá uvolnit pokožku a regulovat tvorbu kožního mazu.

ⓘ Poznámky

- Každý režim má 3 úrovně intenzity. Doporučujeme používat nejnižší úroveň intenzity a poté ji postupně zvyšovat podle vašich zvyklostí péče o pleť a snášenlivosti pokožky.
- Zařízení má inteligentní režim rozpoznávání, což znamená, že běží pouze tehdy, když jsou elektrody v kontaktu s rukou a když se ultrazvuková hlavička dotýká pokožky obličeje. V opačném případě se produkt zastaví.
- Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko „On/Off“. Všechna světla pak zhasnou.
- Režim "Čištění" se doporučuje provádět každé dva až tři dny. Režim „Výživy pleti“

lze použít po aplikaci kosmetického roztoku každý večer, ne však déle než 2 až 3 minuty. Ostatní režimy lze provádět po režimu „výživy pleti“ v závislosti na vašich osobních zvyklostech před spaním a lze je používat každý den. Doporučuje se, aby každé použití trvalo 3 až 5 minut, ale nemělo by přesáhnout 8 minut.

- Abyste se ujistili, že zařízení funguje správně, musíte se při používání dotýkat elektrody na přístroji.
- Ultrazvuková hlavička je vodotěsná, ale tělo přístroje nikoliv. Pokyny k čištění si prosím přečtěte v tomto návodu.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej a nechte jej přibližně deset minut vychladnout. Poté skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé světlo.
- Po každém použití zařízení pečlivě očistěte měkkým hadříkem. V případě potřeby může být hadřík mírně vlhký. Ujistěte se, že voda nepronikla dovnitř.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. Mohli byste zařízení poškodit.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody, protože by mohla proniknout do zařízení a poškodit jej.

8. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název výrobku	PureSkin
Číslo výrobku	LA131312
Rozměry	16.6 x 5 x 5cm
Hmotnost	± 145 gr
Specifikace baterie	3.7V, 800mAh
Doba nabíjení	± 2 hodiny
Spotřeba energie (pokud se přístroj nenabíjí)	3 W
Požadavek nabíječky	DC 5V A1
Pohotovostní proud	Méně než 20 µA

9. RADY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE ODPADU

Veškeré obaly jsou složeny z materiálů, které nepředstavují žádné nebezpečí pro životní prostředí a které lze zlikvidovat ve vašem místním třídícím středisku jako

druhotné suroviny. Karton lze vyhodit do koše na recyklaci papíru. Obalovou fólii musíte odnést do místního třídícího a recyklačního střediska.

Po ukončení používání zařízení jej prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu se zákonem.

10. OMEZENÁ ZÁRUKA

LANAFORM poskytuje na tento produkt záruku na jakoukoli materiálovou nebo výrobní vadu po dobu dva roky od data nákupu, s výjimkou okolností popsaných níže.

Záruka LANAFORM se nevztahuje na škody způsobené běžným opotřebením tohoto výrobku. Kromě toho se záruka vztahující se na tento produkt LANAFORM nevztahuje na škody způsobené hrubým, nevhodným nebo nesprávným používáním, nehodami, použitím neautorizovaného příslušenství, změnami provedenými na produktu nebo jinými okolnostmi jakéhokoli druhu, které jsou mimo kontrolu LANAFORM.

LANAFORM nemůže nést odpovědnost za jakýkoli druh vedlejších, nepřímých nebo specifických škod.

Veškeré implicitní záruky týkající se vhodnosti produktu jsou omezeny na dobu dvou let od prvního data nákupu, pokud lze dodat kopii dokladu o koupi.

Po přijetí LANAFORM váš spotřebič opraví nebo vymění podle svého uvážení a vrátí vám jej. Záruka je platná pouze prostřednictvím servisního centra LANAFORM. Jakýkoli pokus o opravu tohoto produktu, osobou jinou než servisním střediskem LANAFORM, způsobí neplatnost této záruky.

Výrobce & Dovozce
Lanaform SA
Rue de la Légende, 55 4141 Louveigné, Belgie
+32 4 360 92 91
info@lanaform.com www.lanaform.com

Distributor v ČR a SR:
CM Trade Via, s.r.o.
Olomoucká 3419/7
618 00 Brno Židenice
www.cm-trade.cz

Datum poslední úpravy: 15. 10. 2024